Pardentales
tecnología e innovación

PORTAFOLIO

Clínico Ivoclar



(+57) 316 010 1827

cotizaciones@pardentales.com

@pardentalesltda

Autopista Norte Km 19 Centro
Empresarial Tyfa of 302

Tabla de contenido

01 Introducción

¿Quiénes somos?
¿Por qué elegirnos?

02 Línea de Accesorios

OptraDam Plus
OptraGate 2
OptraGloss
OptraSculpt & OptraSculpt Pad
OptraStick

03 Línea de Materiales Restaurativos

Cention® N

Tetric® N-Line
- N-Etch
- Tetric N-Bond
- Tetric N-Bond Universal
- Tetric N-Ceram 2
- Tetric N-Flow 2
- Tetric N-PowerFill 2
- Tetric N-PowerFlow 2

IPS Empress® direct
- IPS EMPRESS® DIRECT
- IPS Empress® Direct Color
- IPS Empress® Direct Opaque

04 Lámparas de Fotocurado

Bluephase® N Cure
Bluephase® NG4
Bluephase® Power Cure

05 Materiales de Cementación

Multilink®
- Multilink® Speed
- Multilink® N
- Multilink® Hybrid Abutment

Variolink®
- Variolink® N
- Variolink N LC
- Variolink® Esthetic LC y DC
- Variolink® Try-in
- Ivoclean®

Monobond® N
- Monobond® Etch & Prime

06 Materiales Temporales

Telio InLay/Onlay

Pardentales
tecnología e innovación

¡Sonríe con confianza!

Pardentales es una empresa con más de **40 años de experiencia** en la venta de insumos dentales y equipos radiológicos para **Colombia**.

Nos enorgullece ser **importadores directos** de marcas reconocidas como Ivoclar, Carestream Dental, Dexis (Envista) y STA (Milestone Scientifics).

¡Confía en Pardentales para sonrisas perfectas!

Carestream DENTAL

DEXIS

STA Single Tooth Anesthesia® SYSTEM

ivoclar

the Wand®



Pardentales
tecnología e innovación

¿Por qué elegirnos?

- Estamos comprometidos con la excelencia en el servicio y la calidad de productos.
- Importando productos de marcas reconocidas y respetadas en la industria odontológica, garantizando la calidad y la confiabilidad de los equipos.
- Traemos a Colombia las últimas innovaciones dentales a nivel mundial.
- Brindamos servicios de soporte y mantenimiento para garantizar que los equipos sigan funcionando de manera óptima a lo largo del tiempo.
- Nos aseguramos que todos los productos importados cumplan con las regulaciones y normativas locales e internacionales.
- Contamos con un SSA para importaciones de equipos radiológicos.

¡Confía en Pardentales para llevar tu práctica dental a otro nivel!



ivoclar



Making People Smile



Línea de Accesorios

OptraDam® Plus

Sencillo y rápido aislamiento absoluto

Gracias a su diseño tridimensional con forma anatómica y flexible, OptraDam® es completamente diferente a los diques de goma convencionales. Como el dique se estira automáticamente en la dirección oral, se asegura un encaje automático en la cavidad oral. OptraDam® está disponible en tallas “Regular” y “Small” para adultos.

Indicaciones:

- Restauración adhesiva directa de dientes.
- Cementación adhesiva indirecta (por ej. de coronas o coronas parciales).
- Tratamiento endodóntico.
- Toma de Radiografías periapicales.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Caja x 50 Unidades: Tamaños Regular & Small.

OptraDam® Plus

Ventajas

- Alto confort del paciente gracias a la mejorada elasticidad del material, los labios y las mejillas se retractan suavemente alrededor de la circunferencia de la boca. Como consecuencia, OptraDam® Plus es ahora incluso más cómodo de usar incluso durante sesiones prolongadas.

- Fácil aplicación gracias a la flexibilidad mejorada de los anillos de plástico, OptraDam® Plus se puede colocar más fácilmente en la boca del paciente, así mismo el aislamiento de la encía se ha mejorado. Por otro lado, la capacidad de recuperación elástica mejorada del material de látex, se puede llegar fácilmente a los puntos de contacto, lo que facilita el procedimiento de aislamiento.

- Aislamiento simultáneo de ambas arcadas gracias a su colocación sin tensión: Su forma anatómica ayuda a crear un campo de tratamiento considerablemente mayor. Al mismo tiempo se logra el aislamiento completo de ambas arcadas.



OptraGate® 2

Amplia el campo operatorio de manera fácil, efectiva y cómoda

El OptraGate® 2 es un separador sin látex para labios y mejillas. Su flexibilidad y elasticidad tridimensionales garantizan que sea cómodo de usar y ayudan a los pacientes a mantener la boca abierta. También facilitan el control de humedad. Un tercer anillo situado sobre el componente elástico soporta su forma anatómica.

Su nueva versión cuenta con un anillo intermedio situado entre los anillos intraoral y extraoral ligeramente comprimiendo.




Presentaciones disponibles en Pardentales

Caja x 80 Unidades (Refill) en 2 tamaños: Regular & Small.

OptraGate® 2

Indicaciones

Elegir el tamaño adecuado para el paciente es indispensable para que el retractor de labios y mejillas se coloque correctamente. Para ello estime la distancia desde las comisuras labiales del paciente en posición en reposo usando la medida que tiene cada empaque individual. La idea es seguir la línea ligeramente curvada de los labios. Esto reduce el riesgo de elegir un tamaño demasiado pequeño. Si la medida de entre los extremos de la boca posibilita usar dos tallas es recomendable elegir la más grande.

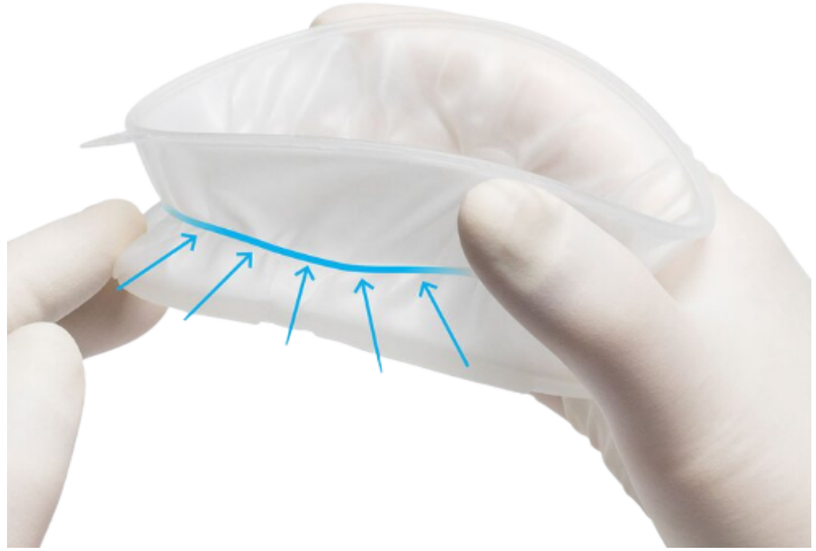

OptraGate® 2

Ventajas

Acceso sencillo a la cavidad:

- Los labios y las mejillas se retraen uniformemente alrededor de la boca.
- El campo de tratamiento es accesible y manejable.
- Aislamiento eficaz y relativamente rápido.

Procedimiento de tratamiento relajado y más eficiente:

- Fácil de colocar.
- Mayor concentración en el procedimiento de tratamiento real.
- Facilita el trabajo del Odontólogo y su auxiliar.

Gran comodidad de uso para el paciente:

- Flexibilidad tridimensional para un buen posicionamiento intraoral.
- Material suave y flexible para acomodar los frenillos labiales superior e inferior.
- Buena compatibilidad gracias su composición libre de látex.



OptraGloss®

Sistema de pulido universal

OptraGloss® es un sistema de pulido universal para uso extraoral e intraoral. Está indicado para restauraciones dentales de composite y cerámica con pulido de alto brillo.

OptraGloss® consta de un pulidor diamantado azul oscuro para el pre pulido y un pulidor diamantado azul claro para el pulido de alto brillo. Para el pulido en un solo paso de obturaciones de resina, solo se utiliza el pulidor de alto brillo. Los pulidores se presentan en las formas "Copa" (Cup), "Llama" (Flame), "Lente" (Len) y ahora también "Rueda espiral" (Spiral wheel) (sólo como pulidor de alto brillo).



Presentaciones disponibles en Pardentales

OptraGloss Assortment, OptraGloss Refill Cup HP (Kit x 10 Unidades), OptraGloss Refill Flame HP (Kit x 10 Unidades), OptraGloss Refill Lens HP (Kit x 10 Unidades), OptraGloss Refill Spiral Wheel HP (Kit x 10 Unidades), OptraGloss Composite (Kit x 8 Unidades).

OptraGloss®

Indicaciones

- Pulido de obturaciones de resina.
- Pulido de restauraciones de cerámica de vidrio, cerámica feldespática y zirconio.

Ventajas

- Debido a un alto contenido de diamantes de hasta el 70 % en peso, se garantizan excelentes resultados de pulido.
- Superficies de restauraciones especialmente lisas y brillantes.
- No necesita pasta de pulido adicional.
- Pulido de alto brillo en dos pasos para restauraciones cerámicas.
- Un sistema para restauraciones en resina y restauraciones cerámicas en la práctica odontológica.



OptraSculpt® Pad Assortment

Indicaciones

OptraSculpt® Pad

- Puntas de espuma sintética para un modelado sin adherencia ni marcas.
- Dos tamaños de puntas para un modelado eficiente de carillas directas en resina y restauraciones clase III y IV.
- Escala de referencia en el instrumento de mano para registrar la alineación del eje y el ancho de los dientes anteriores.
- Ángulo de trabajo óptimo para la región anterior.

Estética profesional

- El instrumento no deja marcas en la superficie de la restauración en resina.
- Disminución de las inclusiones de aire en la resina durante la aplicación.
- Textura homogénea de la superficie.



Presentaciones disponibles en Pardentales

OptraSculpt Pad Assortment, OptraSculpt Pad Refill Green & Black,

OptraSculpt® Next Generation

Indicaciones

OptraSculpt® Next Generation

- Tres tipos de puntas para la creación profesional de estructuras dentales sofisticadas: Bola, punta puntiaguda y cincel.
- Ángulo de trabajo óptimo para la región posterior.
- Recipiente de almacenamiento higiénico para un fácil acceso a las puntas.

Fácil adaptación

- Las propiedades antiadherentes reducen la adherencia de la resina al instrumento.
- Compatibilidad: los accesorios pueden utilizarse con ambos instrumentos.
- Los ángulos de trabajo se ajustan a las regiones anterior y posterior.



Presentaciones disponibles en Pardentales

OptraSculpt Starter Kit, Refill ball, cincel, puntiaguda.

OptraStick®

Eficaz transporte de la restauraciones indirectas

El OptraStick® es un instrumento de colocación que presenta una punta adhesiva flexible. La punta permite recoger restauraciones indirectas para realizar el proceso de cementación, permite que sean transportadas y colocadas de forma correcta, rápida y sencilla.

Ventajas

- Recogida rápida.
- Adherencia precisa.
- Posicionamiento seguro.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Caja x 48 Unidades



Línea de Materiales Restaurativos

Cention® N

Material de relleno como alternativa al reemplazo de la amalgama dental y de base intermedia.

Cention® N ofrece una estética del color del diente junto con una alta resistencia a la flexión. El nuevo material de relleno pertenece al grupo de materiales de Alkasytes (patente de casa comercial) El relleno alcalino patentado aumenta la liberación de iones de hidróxido para regular el valor del pH durante los ataques ácidos. Como resultado, la desmineralización se puede prevenir. Además, la liberación de grandes cantidades de fluoruro además de iones de calcio forma una base sólida para la remineralización del esmalte dental. El sistema iniciador permite un buen auto curado químico.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Kit Polvo por 15 g y líquido por 4 ml (Color Universal A2).

Cention® N

Indicaciones

- Cention® N es notablemente fácil de usar. No requiere el uso de imprimación, barniz o dispositivo de curado.
- Se pueden ahorrar hasta siete pasos de trabajo en comparación con la aplicación de cementos de ionómero de vidrio convencionales. Solo se requiere dosificación, mezcla, llenado y acabado.
- Restauraciones permanentes de Clase I y II.
- Restauración de dientes temporales en zona posterior.

Ventajas

- Más fuerte que el cemento de ionómero de vidrio.
- Más estético que la amalgama y el cemento de ionómero de vidrio.
- Reemplazo de la estructura dental que ahorra tiempo en solo cuatro pasos de trabajo.



Tetric® N-Line 2

La solución para todas las cavidades

Tetric® N-Ceram 2

La nueva versión para tus restauraciones

Tetric® N-Ceram 2 es un composite nanohíbrido fotopolimerizable radiopaco para restauraciones directas de dientes anteriores y posteriores.

Está disponible en jeringa de 3.5gr en 13 colores: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, T, A2 dentina, A3.5 dentina, Bleach L, Bleach XL.



Tetric® N-Flow 2

Resina Convencional Fluida - Jeringas de 2 g

- Líder en cavidades clase I – V.
- Restauración de cavidades III & IV.
- Restauraciones pequeñas.
- Buena capacidad de enmascaramiento (translucidez aprox. 6 – 31%*).
- Usada para la técnica de inyección.
- Disponible en 14 colores (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, T, A2 dentina, A3.5 dentina, B2 dentina, Bleach M, Bleach L, Bleach XL)



Tetric® N-PowerFill 2

Resinas Posteriores - Jeringas de 3.5 g

- Restauración de cavidades I y II, bloques de 4 mm para la zona posterior.
- Restauración de dientes deciduos.
- Reconstrucción de muñones.
- Translucidez como el esmalte (aprox. 15.5%*).
- Disponible en 3 colores (IVA, IVB, IVW)





Tetric® N-PowerFlow 2

Resina Posterior Fluida - Jeringas de 2 g

- Base/Liner en cavidades clase I & II en zona posterior.
- Restauración de dientes temporales.
- Translucidez como la dentina (aprox. 9.5%*).
- Consistencia de autonivelación, para sellar cajuelas interproximales.
- Disponible en 3 colores (IVA, IVB, IVW)





Ventajas Línea Tetric® N2

- Efecto camaleón pronunciado que garantiza una mezcla de tonos natural.
- Estética natural para restauraciones posteriores.
- Procesamiento y aplicación eficientes.
- Tiempo de tratamiento reducido hasta en un 51% en la región posterior cuando se utiliza con productos complementarios de Ivoclar.
- Muy buenas propiedades de manipulación para adaptarse a cualquier situación.
- Fácil manipulación y moldeado de las restauraciones.



N-Etch

Gel de grabado para el esmalte y el acondicionamiento de la dentina

N-Etch es un gel de grabado que contiene 37% de ácido fosfórico. N-Etch se usa para grabar el esmalte y acondicionar la dentina junto con restauraciones de resina, selladores y la cementación adhesiva de restauraciones indirectas de cerámica sin metal o resina.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Jeringa x 2 g, Jeringa Jumbo x 30 g.

Indicaciones

Está indicado para su uso en la técnica de grabado de esmalte o grabado total en combinación con adhesivos, composites (resinas), materiales de cementado o selladores de fisuras.

N-Etch

Ventajas

- Se distingue por su color azul de un fuerte contraste con el diente que minimiza el riesgo de sobre grabado.
- El espesor del material es perfecto para una aplicación rápida y eficaz.
- Su consistencia tixotrópica hace que sea eficaz realizar las diferentes técnicas de grabado.



Tetric® N-Bond

Adhesivo de quinta generacion fotopolimerizable para restauraciones directas e indirectas



Tetric® N-Bond es un adhesivo mono componente fotopolimerizable nano-optimizado que se utiliza en combinación con la técnica de grabado total.

El mejor aliado para Tetric® N-Bond es el gel de ácido fosfórico N-Etch. Tetric® N-Bond se utiliza en las restauraciones de resinas e indirectas, así como en la cementación adhesiva de restauraciones indirectas como carillas o coronas de cerámicas vítreas.

Tetric® N-Bond

Ventajas

- Adhesión de alta resistencia en el esmalte y la dentina para un resultado exitoso.
- Nano-rellenos integrados que garantizan una capa brillante visible y una cobertura completa de los túbulos dentinarios.
- Formación de una capa homogénea para una mejor adhesión a la estructura dental.
- Libre de Acetona, contiene etanol como solvente para una fácil aplicación en una capa y una mejorada estabilidad sin evaporación prematura.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Botella x 6 g.

Tetric® N-Bond Universal

Adhesión universal con alta resistencia adhesiva y versatilidad.

Tetric® N-Bond Universal es un adhesivo universal de octava generación, mono componente y de fotocurado a la luz para procedimientos de unión directa e indirecta. Es el único agente de unión universal disponible en la eficiente presentación de VivaPen.

Los usuarios de Tetric® N-Bond Universal están encantados con el nuevo e innovador diseño en VivaPen, que además de ser muy fácil de utilizar proporciona hasta tres veces más aplicaciones por ml en comparación con las botellas convencionales. Tetric® N-Bond Universal le permite lograr una alta resistencia de unión confiable y ayuda a minimizar el riesgo de sensibilidad postoperatoria.



Tetric® N-Bond Universal

Indicaciones

- Restauraciones directas con la gama de resinas Tetric N-Line.
- Restauraciones directas con resinas Empress Direct, resinas de alta estética.
- Reparación de restauraciones fabricadas a base de resinas o cerámica.
- Desensibilización de áreas cervicales hipersensibles.
- Sellado de superficies dentales preparadas antes de la cementación temporal.
- Restauraciones indirectas.
- Cementación adhesiva de restauraciones indirectas a base de resinas o cerámicas vítreas.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Botella x 3 g, Botella x 6 g, VivaPen de 2 ml.

Tetric® N-Bond Universal

Mayor confianza

- Protocolo de aplicación simple: aplicación rápida y controlada directamente en la boca del paciente.
- Alta resistencia de unión fiable (> 25 MPa) en el esmalte y la dentina, independientemente del protocolo de grabado utilizado o de las condiciones de humedad en la superficie del diente.
- Riesgo mínimo de sensibilidad postoperatoria en condiciones secas y húmedas.





IPS Empress® Direct

Resinas de alta estética para la zona anterior y posterior

IPS EMPRESS® DIRECT

Resina altamente estética para restauraciones directas e indirectas en el sector anterior y posterior. Está disponible en cinco niveles de translucidez diferentes. Por lo tanto, diferentes tipos de características anatómicas pueden reproducirse fielmente.

Fórmula avanzada de cerámica vítrea que garantiza una combinación perfecta de estética y durabilidad.

Fácil aplicación y capacidad de esculpido en carillas e incrustaciones para crear restauraciones precisas y naturalmente hermosas.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Jeringas Empress Direct de 3 g disponibles en 32 colores.

IPS Empress® Direct Color

Material de caracterización para personalizar cualquier restauración.

Los materiales se aplican simplemente justo debajo de la capa de cobertura final.

Innovadoras tonalidades han sido creadas meticulosamente para imitar la apariencia natural de los dientes, permitiendo personalizar cada restauración de manera excepcional.

Ya sea un diente anterior o posterior, brindará la versatilidad necesaria para recrear la gama completa de colores dentales, asegurando resultados estéticos y auténticos.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Jeringas Empress Direct Color (Tintes de 1 g – Colores: blanco, Amarillo miel, azul, gris, ocre y café).

IPS Empress® Direct Opaque

Material opaco fotopolimerizable, cubre de manera confiable estructuras dentales descoloridas y superficies metálicas expuestas.

Opacador ideal para enmascarar efectos de color no deseados. Este material opaco fotopolimerizable es ideal para enmascarar de forma fiable decoloraciones dentales no deseadas, superficies metálicas expuestas y acumulaciones centrales en regiones anterior y posterior. Dado su poder de enmascaramiento, es suficiente aplicar en capas finas e incluso en las zonas más profundas, la decoloración desaparece.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Jeringas Empress Direct Opaque (Color Universal A3) de 1.8 g.

Ventajas de la linea IPS Empress® direct

- Tonos realistas para restauraciones de aspecto natural.
- Fácil aplicación de matices de los tonos con Trans-Opal.
- Resultados estéticos de larga duración.
- Manejo conveniente para requerimientos sofisticados.
- Cinco niveles diferentes de Translucidez.
- Las Dentinas tienen propiedades opacas fieles a la naturaleza.
- Los Esmaltes tienen una mayor translucidez, por lo tanto permiten que la luz se difunda a través de la Dentina.





Lámparas de Fotocurado

Bluephase® N Cure

Simplicidad para tu fotopolimerización

Lámpara de fotopolimerización altamente fácil de usar con solo presionar un botón se activa el único programa con el que cuenta la lámpara a una intensidad de 1200 mw / cm2 y un tiempo de trabajo de 10 segundos, lo que hace que sea una lámpara fácil de usar, convirtiéndola en una luz de fotocurado diaria para una fotopolimerización sin esfuerzo.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Lámpara Bluephase N Cure Inalámbrica.

Bluephase® N Cure

Ventajas

- Polimerización confiable debida a la alta intensidad de luz.
- Polimerización uniforme debido a la distribución homogénea de la luz gracias a su fibra.
- Longitud de onda de 385 a 515 nm.



Presentación disponible en Pardentales

Lámpara Bluephase N-Cure inalámbrica, base de carga, cable eléctrico, protectos antideslumbrante, 3 conos antideslumbrantes, batería, soporte de pieza de mano.

Bluephase® NG4

La luz de fotocurado de alto rendimiento

Luz de curado de alto rendimiento, tiene una potencia de 2.000 mw/cm2 de intensidad. La innovadora Bluephase® NG4 está diseñada para la polimerización intraoral de todos los materiales dentales fotopolimerizables actuales, con una longitud de onda de 385 a 515 nm. Estos materiales incluyen restauradores, agentes de unión, adhesivos, bases, revestimientos, selladores de fisuras, temporales, así como materiales de fijación para soportes y restauraciones indirectas como incrustaciones de cerámica.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Lámpara Bluephase NG4 Inalámbrica.

Bluephase® NG4

Ventajas

- Sistema Polywave, capaz de fotopolimerizar todos los fotoiniciadores del mercado dental.
- Pantalla retroiluminada, más pequeña, ergonómica, cuenta con 3 programas: Precurado, High y Turbo.
- Polimerización uniforme debido a la distribución homogénea de la luz a través de su punta de luz.
- Alta intensidad permite el curado de todo tipo de restauraciones.
- Guía de luz ancha y giratoria de 10 mm para procedimientos que ahorran tiempo.
- Tiempos de curado cortos a partir de 5 segundos carga de batería sin contacto.



Presentaciones disponibles en Pardentales

forros protectores, Bluephase Sleeves Caja x 50 Unidades.

Bluephase® Power Cure

Fotopolimerización inteligente al alcance de la mano

Lámpara de última tecnología que cuenta con el sistema Polyvision, un sistema inteligente patentado por Ivoclar que le avisa al odontólogo de cualquier operación incorrecta, su pantalla retroiluminada le mantiene informado sobre el programa y el tiempo del proceso de polimerización. Su máxima intensidad se logra en 3 segundos a una potencia de 3.000 mw/ cm2 y gracias a la fibra de vidrio con un diámetro de 10 a 9 mm permite una distribución homogénea de la luz siendo más eficiente y logrando una completa fotopolimerización de la restauración.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Lámpara Bluephase Power Cure Inalámbrica.

Bluephase® Power Cure

Ventajas

- Tiene 4 programas de polimerización para diferentes indicaciones.
- El radiómetro integrado permite medir la intensidad lumínica con facilidad y rapidez.
- Guía de luz de 10 - 9 mm amplia y giratoria.
- Pantalla retroiluminada que mantiene informado al odontólogo sobre el programa y tiempo en uso.
- Tiempos cortos de exposición a la luz a partir de 3 segundos



Presentaciones disponibles en Pardentales

forros protectores, Bluephase Sleeves Caja x 50 Unidades.



Materiales de Cementación

Multilink®

Cementos resinosos de autocurado con opción de fotocurado

Multilink® Speed

Cemento verdaderamente rápido

Multilink® Speed es un cemento de resina de composite autograbador, autoadhesivo y de autocurado, el cual puede fotopolimeralizarse si se desea. El cemento de resina se caracteriza por un protocolo de aplicación directa y buenas propiedades mecánicas.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Jeringa de automezcla de 6 g

Multilink® Speed

Indicaciones

Está indicado para la cementación rápida de las restauraciones hechas con los siguientes materiales:

- Metal y metal cerámica.
- Cerámica sin metal de alta resistencia (cerámica de óxido de circonio, cerámica vítrea de Disilicato de litio).
- Resina reforzada con fibra, metal y metal cerámica.
- Retenedores intraradiculares.

Ventajas

- Aplicación fácil y eficiente.
- Fácil limpieza de los excesos de cementos.
- Buenas propiedades físicas, tales como la absorción de agua, la solubilidad y radiopacidad.
- Dentro de su composición tiene MDP, lo que genera altos valores adhesivos.

Multilink® N

Unión fuerte y duradera: cementación adhesiva de larga duración

Multilink® N es un cemento resinoso de autocurado con opción de fotocurado.

La resina de cementación y el adhesivo autograbador (Multilink® N Primer) del sistema de Multilink® N-System, están especialmente coordinados entre sí.



Multilink® N

Indicaciones

- Está indicado para la cementación adhesiva de metal, metal cerámico, cerámica sin metal y restauraciones de resina indirecta.

- Este cemento debe usarse con el Monobond N, que irá directamente en la restauración y los imprimadores A y B que irán a la estructura dental, son adhesivos autograbadores que van al diente y activan el cemento.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Multilink N System Pack,(Jeringa de automezlca de 6 gr, Monobond N 5 gr, Primers A y B de 3 gr), refill Multilink N 6gr.

Multilink® Hybrid Abutment

Cemento extraoral y autopolimerizable, desarrollado para la cementación de los pilares de implantes dentales

Multilink® Hybrid Abutment es un cemento resinoso autopolimerizable, especialmente desarrollado para la cementación de los pilares de implante personalizados a la interfaz del pilar, que asegura una adhesión fuerte y resistente de una estructura cerámica de disilicato de litio u óxido de zirconio a una base de titanio.

Gracias a sus dos niveles de opacidad, Multilink® Hybrid Abutment consigue una gran estética, mimetizando por completo la base del pilar con la restauración. Se convierte así en el mejor complemento de los bloques IPS E. Max Abutment Solutions.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Jeringa de 9 g, color HO

Multilink® Hybrid Abutment

Indicaciones

Multilink® Hybrid Abutment es un cemento de resina autopolimerizable diseñado para la cementación permanente de estructuras de cerámica de óxido de vitrocerámica o zirconio disilicato de litio en la aleación de titanio / titanio o bases de óxido de circonio en la fabricación de pilares o coronas híbridas.



Ventajas

- Gran fuerza de adherencia para resultados fiables de cementación.
- Dos niveles de opacidad para una estética óptima.
- Fácil manejo debido a su jeringa conveniente (Automix).
- Está indicado para un uso extraoral, así como la cementación permanente de estructuras de cerámica.



Variolink®

Amplia gama de cementos resinosos y estéticos

Variolink® N

Resultados estéticos con una gama de sombras armoniosa

Variolink® N es un material resinoso de sujeción ligero y curado dual para la cementación adhesiva de restauraciones hechas de Disilicato de litio de cerámica vítrea, y resinas compuestas, que dentro de su composición contiene aminas terciarias. Es adecuado para el asentamiento de incrustaciones, onlays, carillas y coronas.




Presentaciones disponibles en Pardentales

Jeringas de 1.5 g Base y Catalizador (Color Bleach XL).

Variolink® N

Ventajas

- Resultados estéticos: La armoniosa gama de sombras ayuda a lograr resultados estéticos óptimos de la restauración final.
- Consistencias personalizadas para adaptarse a la demanda de la indicación específica.
- Fácil identificación del exceso de material gracias a la alta radiopacidad.

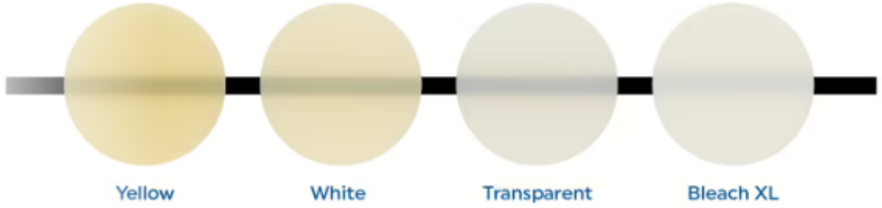

Variolink® N LC

Resultados estéticos con una gama de sombras armoniosa

Variolink® N LC es un material estético resinoso de fotocurado especialmente adecuado para la cementación adhesiva en la región anterior. Está disponible en 3 colores (Clear, +1 y +2). Los diferentes tonos ofrecen la opción de un efecto iluminador.




Presentaciones disponibles en Pardentales

Jeringa de 1.5 g.

Variolink® N LC

Indicaciones

- Se recomienda para restauraciones muy finas (<2 mm) y altamente translúcidas.
- Debido a la formulación especial reducida en aminas terciarias, apoya la estabilidad de la sombra y reduce el riesgo de decoloración causada por la exposición a la luz diurna intensa.
- Indicado para cementar carillas y lentes ya que no necesita catalizador.

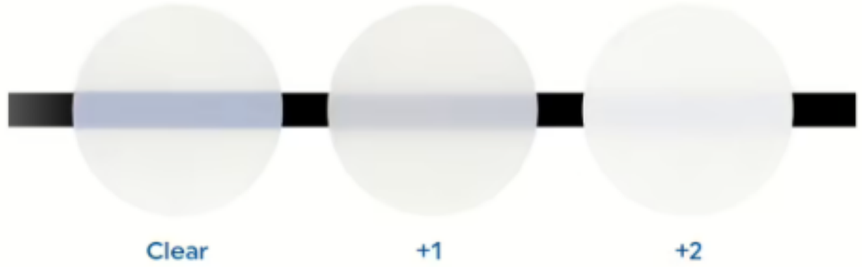

Variolink® Esthetic LC y DC

El todoterreno para la cementación adhesiva.

Es un cemento fotopolimerizable y de polimerización dual que se utiliza para la cementación adhesiva de restauraciones dentales estéticas en zona anterior.

El cemento es muy versátil y, por lo tanto, ofrece una flexibilidad excepcional a la hora de elegir una solución adecuada para todo tipo de restauraciones y materiales.



Variolink® Esthetic LC y DC

Beneficios


- Una solución versátil para la máxima flexibilidad en la cementación adhesiva de todo tipo de restauraciones indirectas.
- Variolink® Esthetic DC es adecuado para Disilicato de litio, vitrocerámica, resina compuesta, óxido de circonio y metal, restauraciones de mayor grosor.
- Variolink® Esthetic LC es adecuado para la cementación adhesiva de restauraciones hechas de Disilicato de litio, vitrocerámica o resina compuesta, que miden <1 mm de espesor y muestran una translucidez adecuada, como los lentes cerámicos y carillas.



Variolink® Esthetic LC y DC

Beneficios

- Son altamente esteticos ya que son libres de aminas terciarias y cuentan con el fotoiniciador patentado ivocerin.
- Eliminación fácil y controlada del exceso después del curado.
- Alta radiopacidad para una fácil detección del exceso de material de cementación y diagnóstico de caries secundaria.
- Solución completa para la cementación adhesiva ya que son productos cuidadosamente coordinados para la cementación adhesiva, desarrollados para trabajar juntos.
- Buena resistencia al desgaste y calidad de margen.

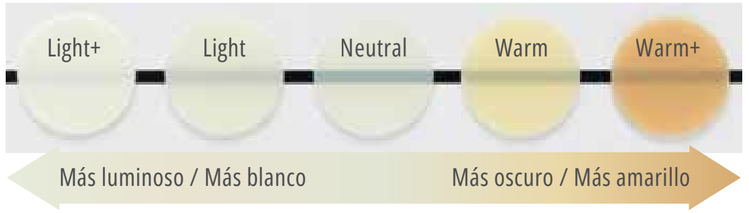



Presentaciones disponibles en Pardentales

Jeringas de 2 gr (LC) Y 5 gr (DC) – (Colores en las 2 presentaciones: Light, Light +, Neutral, Warm y Warm +).

Variolink® Esthetic LC y DC

Nuevo color y nuevas características: WHITE OPAQUE

- Variolink Esthetic LC con viscosidad optimizada, manejo mejorado y mejor respuesta táctil al colocar carillas.
- Cobertura eficiente y mejores resultados estéticos en caso de pigmentación de la estructura dental.
- Buena fluidez, asentamiento fácil y fiable.
- Exceso de material estable, se puede eliminar más fácil y no fluye hacia el surco.
- Baja pegajosidad, sin fibrosidad y por lo tanto, sin contaminación de dientes vecinos.



Ivoclean®

La pasta de limpieza universal.

La pasta de limpieza universal Ivoclean® limpia de manera efectiva las superficies de unión de las restauraciones tras la prueba intraoral y por tanto cumple de manera óptima con los prerrequisitos para el procedimiento de cementación.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Botella de 5 gr

Indicaciones

Limpieza extraoral de las superficies cerámicas y de metal, pretratadas, las cuales se han contaminado durante la prueba intraoral.

Ventajas

- Limpieza efectiva.
- Universal – para todo tipo de materiales restaurativos.
- Aplicación sencilla.
- Aumenta los niveles de adhesión.

Monobond® N

Simplemente Universal para una gran variedad de materiales

Monobond® N es un primer universal para el acondicionamiento de todo tipo de superficies de restauración. El primer permite a los usuarios lograr una adhesión duradera y resistente en cualquier material restaurativo dental ya que combina tres metacrilatos funcionales – metacrilato de silano metacrilato fosfórico y metacrilato de sulfuro, capaces de acondicionar todo tipo de materiales dentales.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Botella de 5 gr

Monobond® N

Ventajas

Unión fiable y fuerte

- Monobond® N contiene una combinación innovadora de monómeros funcionales que promueven una fuerte unión con óxido de circonio, la vitrocerámica y las aleaciones metálicas, comparable al rendimiento de los agentes adhesivos para materiales individuales.



Indicaciones

Protocolo de aplicación uniforme

- El material se utiliza de la misma manera en todos los materiales de restauración: aplicar sobre la superficie interna de las restauraciones indirectas, dejar reaccionar durante 60 segundos y airear.

Monobond® Etch & Prime

Único para grabar y silanizar en un sólo paso

Monobond® Etch & Prime es el primer acondicionador mono componente en el mundo, el cual le permite grabar y silanizar las superficies de cerámica vítrea en un sólo paso. Al mismo tiempo, la solución limpia cualquier resto de saliva de la superficie.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Producto bajo importación, botella de 5 gr.

Indicaciones

- Tratamiento previo extraoral de cerámica vítrea antes del procedimiento de adhesión con resinas de cementación.

Ventajas

- No es necesario grabar con ácido fluorhídrico si la cerámica vítrea está grabada.
- Proceso rápido que sólo requiere un bote (graba y silaniza la cerámica vítrea en un sólo paso.
- Adhesión estable y de larga duración gracias al nuevo sistema silanizador y acondicionador de cerámica.



Materiales Temporales

Telio Inlay/Onlay

Diseñados como material provisional

Son materiales de restauración fotopolimerizables diseñados para la restauración provisional de cavidades de Clase I y Clase II, sin necesidad de utilizar un cemento provisional adicional. Se puede elegir entre dos colores: “Universal” y “Transparente”.



Presentaciones disponibles en Pardentales

Paquete x 3 jeringas de 2. 5 gr.

Telio Inlay/Onlay

Indicaciones

- Indicado para la obturación de los agujeros de acceso de los tornillos del implante.
- Su uso es flexible y su aplicación rápida y sencilla.
- La consistencia blanda y elástica del Telio Inlay hace que sea especialmente adecuado para la provisionalización de preparaciones de incrustaciones profundas con paredes paralelas.
- La baja elasticidad del Telio Onlay lo hace más fuerte y resistente a la presión externa por lo que es adecuado para la provisionalización de preparaciones grandes y menos retentivas como los onlays.
- Telio Universal es adecuado para las rutinas de trabajo diarias mientras que la Telio Transparente ofrece una solución excelente para provisionalizar cavidades muy profundas gracias a su elevada profundidad de polimerización de 6 mm.

Pardentales
tecnología e innovación

Contáctanos

(+57) 316 010 1827 | 601 884 4772

@pardentalesltda

cotizaciones@pardentales.com

Autopista Norte Km 19 Centro
Empresarial Tyfa of 302

www.pardentales.com

